

Gebruiksaanwijzing

LEES DE VOLLEDIGE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Dit product is voor huishoudelijk gebruik. Bij het gebruik van elektrische producten, vooral in de buurt van kinderen, dienen altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht genomen te worden, waaronder:

GEVAAR – Om het risico van elektrocutie te verminderen:

- Niet gebruiken tijdens het baden.
- Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het kan vallen of in een badkuip of gootsteen terecht kan komen.
- Laat het apparaat niet met water of andere vloeistoffen in contact komen.
- Indien het apparaat in het water is gevallen, verwijder eerst de stekker en pak het dan uit het water.

WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel aan personen te verminderen:

- Houd nauwlettend toezicht op het gebruik van het product door kinderen of gehandicapte personen of wanneer deze in de buurt zijn.
- Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik dit product nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of als het in water is gevallen. Breng het terug naar de leverancier of servicecentrum voor controle en reparatie.
- Plaats het product nooit op een zachte ondergrond, zoals een bed. Houd eventuele luchtopeningen vrij van pluisjes, haar en stof.
- Gebruik niet buitenshuis of op plaatsen waar (h)airspray producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegevoegd aan de ruimte.
- De AC-adapter die bij uw apparaat wordt geleverd, is speciaal voor dit product gemaakt. Gebruik het niet met een ander apparaat en gebruik geen adapter van een ander elektrisch apparaat.
- Alleen DryMax UV: De lamp brandt alleen als de klep gesloten is om blootstelling aan het UV-C-licht te voorkomen. Onderdelen niet wijzigen en de veiligheidsfunctie niet negeren. Kijk niet rechtstreeks naar de UV-C-lamp terwijl deze brandt. Als de lamp stuk gaat, de stekker onmiddellijk uit het stopcontact verwijderen. Niet gebruiken tot het apparaat is gerepareerd door een erkend servicecentrum. Draag handschoenen wanneer u in contact komt met glasdeeltjes. Verwijder op de voorgeschreven manier.

OPMERKING: Dit product is niet ontworpen om ziekten te diagnosticeren, voorkomen, controleren, behandelen of verlichten.

BEDRIJFSTEMPERATUUR

De bedrijfstemperatuur van dit apparaat is van 95° tot 104°F (35° tot 40°C). Dit apparaat werkt optimaal bij een binnentemperatuur van 65° tot 86°F (18° tot 30°C).

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Inleiding

Dit product is ontworpen voor alle soorten hoortoestellen, inclusief gehoorapparaten, geluidsmaskers, oormonitoren, oordopjes, versterkers en implantatieapparatuur. Bij dagelijks gebruik kan het apparaat helpen de meeste hoortoestellen beter laten klinken, langer laten meegaan en betrouwbaarder presteren. Dry & Store verwijdert schadelijk vocht, droogt oorsmeer, isoleert geuren en kan bij hoge luchtvochtigheid de levensduur van de zink-luchtbatterij verlengen. Bovendien verbetert het DryMax UV model het comfort door de bacteriën te doden die de meest voorkomende oorzaak zijn van huidirritatie bij gebruikers van gehoorapparaten.

Voor ingebruikname (belangrijk)

1. **Activeer het droogmiddel:** Een disposable Dry-Brik Mini, die elke maand moet worden vervangen, is inbegrepen. De Dry-Brik vervult drie belangrijke functies: (1) om de vochtmoleculen die vrijkomen uit de apparaten tijdens de droogcyclus permanent te verwijderen, (2) om de relatieve vochtigheid in de box naar een veel lager niveau te brengen dan mogelijk is met alleen een verwarmingstoestel, waardoor het droogvermogen wordt gemaximaliseerd, en (3) om geuren te isoleren.


Om de Dry-Brik Mini te activeren, verwijdert u de folieafdekking. Verwijder de folie pas als u klaar bent om de Dry-Brik te gebruiken, want zodra deze is verwijderd, begint de Dry-Brik met het adsorberen van vocht.

2. **Noteer de activeringsdatum:** Om u te waarschuwen wanneer het tijd is voor vervanging, is een etiket bevestigd aan elke Dry-Brik. Noteer de datum waarop de Dry-Brik in gebruik is genomen op deze kaart.

OPMERKING: Vervang de Dry-Brik Mini elke maand om maximale prestaties te garanderen.

3. **Plaats de geactiveerde Dry-Brik Mini** in uw toestel, zoals weergegeven in **Figuur 3**.

4. **Sluit de AC-adapter aan:** De micro-USB-stekker past op de achterkant van het apparaat. Niet forceren; het moet gemakkelijk schuiven. Sluit tot slot de AC-adapter aan op een werkend stopcontact.

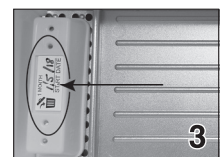

* Sommige modellen bevatten geen lamp die bacteriën doodt. Als dit van toepassing is op uw apparaat, moet u elke instructie of opmerking negeren die verwijst naar germicidal, blauw licht, ultraviolet, UV, UV-C of lamp.

Gebruiksaanwijzing

1. Veeg overtollig vocht en oorsmeer van uw hoortoestellen af voordat u ze in de droogkamer plaatst.

U mag meerdere Toestellen in het droogcompartiment plaatsen zolang de luchtstroom niet geblokkeerd wordt.

U kunt de batterijen erin laten, maar open de batterijklep om luchtcirculatie mogelijk te maken.

2. Sluit de klep en tik licht op de startknop aan de rechterkant op het apparaat. (Figuur 5).



Een groene indicator net boven de startknop licht op. DryMax wordt na 8 uur automatisch uitgeschakeld.

De beste resultaten vereisen een volledige cyclus van 8 uur, maar perioden van slechts 30 minuten kunnen ook nuttig zijn.

3. Het is belangrijk dat de Dry-Brik Mini een maand na active-ring wordt vervangen om het hoogste niveau van zorg voor uw hoortoestellen te waarborgen. Gooi de lege Dry-Brik Mini weg bij het huisvuil.

Over de UV-C Sanitizing Cycle*

(Alleen het DryMax-UV)

Als uw apparaat een UV-C-ontsmettingslamp (DryMax-UV model) heeft, is er 1-1/2 minuut een blauw licht zichtbaar nadat de toestel is ingeschakeld om aan te geven dat de ontsmettingscyclus actief is.

OPMERKING: Alle handelingen stoppen wanneer de klep wordt geopend, waardoor ook de timer wordt gereset.

De lamp in de DryMax-UV doodt kiemen, bacteriën en schimmels door UV-C-licht uit te stralen op een golflengte met een piek van (254 nm) die kiemen en bacteriën doodt. Veel gebruikers zullen hierdoor verminderde jeuk en irritatie ervaren. Dit apparaat is echter geen sterilisator en de fabrikant doet geen uitspraken over de mate van bacteriedood. Het is niet ontworpen om ziekten te diagnosticeren, voorkomen, controleren, behandelen of verlichten. De UV-C-lamp heeft geen invloed op de verwarmings- / droogcyclus.

Gebruik met implantaatapparatuur

De hardware van het implantaat moet droog worden gehouden om goed te kunnen werken, en regelmatig gebruik van dit apparaat elimineert het vocht dat zich uit de omgeving en / of transpiratie ophoopt. Laat zink-lucht-batterijen in de processor zitten (indien van toepassing) maar verwijder het batterijklepje. Plaats de processor, oorstuk en de kabel in het droogcompartiment.

Voor twee sets cochlear implantaten kan de Dry-Brik Mini tussen de twee worden geplaatst om de magneten van elkaar te scheiden.

Algemene verzorging

Voor de beste resultaten dient dit apparaat niet gebruikt te worden op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals een badkamer. Houd de klep te allen tijde gesloten, omdat de werking van de Dry-Brik Mini afneemt als gevolg van adsorptie van vocht uit de omringende lucht. Reinig met een zachte doek. Gebruik nooit krachtige schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen. Spuit geen vloeistof in de lade of op de UV-lamp.

Problemen oplossen

- *Als er geen lampjes oplicht na het aanraken van de startknop:* Is de klep volledig gesloten en is de startknop aangeraakt? Zo ja, controleer dan of de AC-adapter goed is aangesloten op zowel het apparaat als het stopcontact en of het stopcontact een wandschakelaar heeft die is uitgeschakeld. Probeer vervolgens een andere AC-adapter (verkrijgbaar bij de plaats van aankoop of op www.dryandstore.com). Vervang deze alleen met een adapter die door de fabrikant wordt geleverd. Als het apparaat nog steeds niet start, is de interne elektronica mogelijk defect. Breng het apparaat ter evaluatie naar de plaats van aankoop of het servicecentrum.
- *Als het apparaat lawaai maakt:* Geluidsproblemen worden meestal door de ventilator veroorzaakt. Het geluid resoneert in het apparaat, dus geluid horen is normaal, zelfs van de hoogwaardige kogellagers die in dit product worden gebruikt. Als het ventilatorgeluid varieert in intensiteit of frequentie, stuurt u het apparaat terug naar de plaats van aankoop of het servicecentrum voor evaluatie.
- *Als het apparaat niet goed droogt:* Wordt de Dry-Brik Mini regelmatig vervangen? Het is belangrijk dat deze elke maand volgens de instructies wordt vervangen. Aangezien het apparaat net boven lichaamstemperatuur werkt, moet het binnen 30 minuten na het opstarten warm aanvoelen wanneer u de palm van uw hand op de klep legt. Controleer ook of de ventilator beweegt door goed te luisteren of door met uw hand op het deksel een zeer lichte trilling te voelen.
- *Als het blauwe lampje niet brandt (alleen bij DryMax-UV):* Opmerking: De UV-C-lamp gaat na 2 tot 3 seconden branden nadat de startknop op de klep van de DryMax-UV is aangeraakt. Het lampje blijft 90 seconden branden. De klep moet volledig gesloten zijn om de lamp in te schakelen en het lampje dooft wanneer de klep wordt geopend. De lampfunctie heeft geen invloed op de temperatuur of de duur van de 8-uurs droogcyclus. Als het blauwe lampje niet brandt, moet het apparaat worden nagekeken.

Neem contact op voor service als deze tips het probleem niet oplossen:

Bezoek www.dryandstore.com/help of neem contact op met de leverancier of een servicecentrum voor evaluatie.

* Sommige modellen bevatten geen lamp die bacteriën doodt. Als dit van toepassing is op uw apparaat, moet u elke instructie of opmerking negeren die verwijst naar germicidal, blauw licht, ultraviolet, UV, UV-C of lamp.