

# DRY & STORE®

## Návod k Obsluze Přístroje

### DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek je určen k domácímu použití. Při používání elektrických výrobků, zvláště za přítomnosti dětí, se musí vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, a to zejména:

### PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM VŠECHNY POKYNY

**NEBEZPEČÍ** – Pro snížení rizika usmrcení elektrickým proudem:

- Nepoužívejte při koupání.
- Nepokládejte ani neukládejte výrobek na místa, kde by mohl spadnout do výlevky či vany nebo být do ní vtažen.
- Nedávejte jej ani jej nenechte spadnout do vody nebo jiné kapaliny.
- Nesahejte na toto zařízení, pokud upadlo do vody. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

**VAROVÁNÍ** – Pro snížení rizika popálenin, usmrcení elektrickým proudem, požáru nebo poranění osob:

- Pozorně dohlížejte na používání zařízení dětmi či zdravotně postiženými osobami, na nich nebo v jejich blízkosti.
- Používejte tento výrobek pouze ke stanovenému účelu popsanému v tomto návodu.
- Nikdy s tímto výrobkem nepracujte, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku nebo pokud nepracuje řádně, spadl na zem, byl poškozen nebo spadl do vody. Vraťte jej prodejci nebo do servisního střediska k prozkoušení a opravě.
- Nikdy nedávejte výrobek na měkkou podložku, například na pohovku nebo postel. Udržujte větrací otvory průchodné, zbavené vláken, vlasů a podobných nečistot.
- Nepoužívejte v otevřeném prostoru ani s ním nepracujte v prostředí, kde se používají aerosolové výrobky (spreje) nebo kde se podává kyslík.
- Napájecí adaptér dodávaný s přístrojem je vyroben konkrétně pro toto zařízení. Nepoužívejte jej s jiným zařízením a také namísto něj nepoužívejte adaptér od žádného jiného přístroje.
- Jednotky Dry & Store Global používají k dezinfekci ultrafialové záření (UV), které ničí choroboplodné zárodky. Toto světlo nesvítí, když se otevře víko. Neupravujte ani nevyřazujte z provozu žádné díly, protože by tak mohlo dojít k expozici UV záření.\*
- Pokud se lampa\* roztříští, okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky. Při odstraňování částic skla používejte rukavice. Řádně je uložte do odpadu.

**POZNÁMKA** – Tento výrobek není určen k diagnostikování, prevenci, sledování, léčení či úlevě od nemoci.

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah provozní teploty tohoto zařízení je 95°F až 104°F (35°C až 40°C). Toto zařízení bude řádně fungovat při teplotách vnitřního prostředí od 65° F do 86°F (18° C až 30°C).

### TENTO NÁVOD USCHOVEJTE

### Úvod

Tento výrobek byl navržen pro všechny typy sluchadel včetně sluchových pomůcek, maskérů hluku, ušní monitory a zařízení kochleárního implantátu. Při každodenním používání může napomoci k lepšímu výkonu většiny naslouchadel, jejich delší trvanlivosti a provozu s vyšším stupněm spolehlivosti a životnosti vzduchově-zinkové baterie se může prodloužit v prostředí vysoké vlhkosti. Díky výlučné technologii Dry-Max™ zařízení Dry & Store odstraňuje nahromadění škodlivé vlhkosti, vysušuje ušní maz a dezinfikuje povrchy vystavené působení lampy ničící choroboplodné zárodky (pokud je to vhodné).

### Před prvním použitím (důležité)

1. **Aktivujte desikant:** Součástí balení je přípravek Dry-Brik® k jednorázovému použití, jenž musí být každé dva měsíce vyměněn. Vysoušedlo Dry-Brik plní tři důležité funkce: (1) trvale pohlcuje molekuly vlhkosti uvolňované zařízením během cyklu vysoušení, (2) reguluje relativní vlhkost v obalu na mnohem nižší úroveň, než jaké by bylo možné dosáhnout pouze ohřívacem, což maximalizuje proces vysoušení, a (3) zachycuje zápach.

Vysoušedlo Dry-Brik aktivujete sejmutím krycí fólie- (obrázek 1). Fólii nesnímejte dříve, než budete připraveni vysoušedlo Dry-Brik použít, protože po jejím sejmutí začne vysoušedlo Dry-Brik pohlcovat vlhkost.




2. **Zaznamenejte si datum aktivace:** K upozornění na dobu výměny je ke každému vysoušedlu Dry Brik připevněna karta. Na tuto kartu si zapište datum, kdy bylo vysoušedlo Dry-Brik aktivováno. (obrázek 2).



**POZNÁMKA: Pro zajištění maximální výkonnosti vyměňujte vysoušedlo Dry-Brik každé 2 měsíce.**




3. **Umístěte aktivované vysoušedlo Dry-Brik** do své jednotky, jak je zachyceno na obrázku 3.

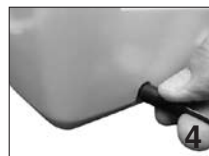

4. **Zapojte síťový adaptér:** Malá kruhová zástrčka se zasune do zadní části přístroje (Obrázek 4). Nepoužívejte sílu; měla by jít zasunout snadno. Nakonec zapojte síťový adaptér do aktivní elektrické zásuvky.

\* Některé modely neobsahují lampu ničící choroboplodné zárodky. Pokud to platí v případě Vašeho zařízení, neberte v úvahu žádný pokyn nebo připomínku, která uvádí, že "ničící choroboplodné zárodky", "modré světlo", "ultrafialové", "UV" nebo "lampa".

## Návod k použití

1. Předtím, než umístíte sluchadla do sušicí komory, seřete z nich vlhkost a ušní maz. Otevřete víko a vložte do velkého prostoru vpravo svá sluchadla a hardware pro implantát. Baterie můžete nechat vevnitř, ale otevřete kryt bateriového prostoru, aby vzduch mohl cirkulovat.
2. Uzavřete víko a jemně stlačte tlačítko start, které je na přední straně jednotky (**obrázek 5**). Během celého sušicího cyklu, který je přibližně 8 hodin, se rozsvítí zelené podsvícení tlačítka start. Nejlepších výsledků se dosahuje při úplném 8hodinovém cyklu, ale prospěšná jsou i období krátká jen 30 minut. Při otevření okna, které vynuluje časový spínač, se zastaví všechny operace.  

3. Je důležité vyměnit vysoušedlo Dry-Brik za dva měsíce ode dne aktivace, aby se zajistila nejvyšší úroveň péče pro sluchové pomůcky. Využitě vysoušedlo Dry-Brik zlikvidujte uložením do domácího odpadu.

## Informace o dezinfekčním UV cyklu\*

Ušní tvarovky a sluchové pomůcky obsahují choroboplodné zárodky a bakterie. Některé modely jsou vybaveny UV lampou ničící choroboplodné zárodky, a mnoho uživatelů proto nebude trpět svěděním a podrážděním. Dezinfekční účinek je nejsilnější v blízkosti lampy a klesá se vzdáleností. Nicméně toto zařízení není sterilizátor a výrobce nevydává žádná tvrzení ohledně stupně likvidace bakterií. Není určen k diagnostikování, prevenci, sledování, léčení či úlevě od nemoci. UV lampu lze odstranit, aniž by to ovlivnilo sušící schopnosti, protože není součástí ohřívacího cyklu.

## Použití s implantáty – zařízení

Hardware implantátu uchovávejte v suchu a pravidelné používání tohoto zařízení může odstranit vlhkost, která se akumuluje z prostředí a/nebo kvůli pocení. Někteří uživatelé mohou zaznamenat zlepšení životnosti vzduchově-zinkové baterie, zvláště v horkém a vlhkém počasí. Individuální výsledky budou odlišné. Zde jsou některé konkrétní návrhy:

- **Závěsné řečové procesory:** Nechte zinko-vzduchové baterie v procesoru (pokud je to vhodné), ale odstraňte kryt baterií. Umístěte procesor, ušní tvarovku a kabel do sušicího prostoru vpravo. Na levou stranu misky nic dalšího kromě vysoušedla nekládejte.
- **Zvukovodové řečové procesory:** Do sušicího prostoru uložte co nejvíce dílů, kolik jich jen bude možné uspořádat bez toho, že by se překrývaly. Omezení velikosti by mohlo znamenat, že procesor bude nutné udržovat odděleně od zbývajících hardwaru. Pokud k tomu dojde, ošetřujte soupravu s mikrofonem častěji než procesor, protože je náchylnější k poškození vlhkostí. Bateriový blok bude možná nutné vyjmout z některých procesorů, pokud je kombinovaná velikost příliš velká pro sušicí prostor.

## Všeobecná péče o výrobek

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud toto zařízení nebudete používat v místech s vysokou vlhkostí, jako je například koupelna. Po celou dobu držte víko zavřené, protože účinnost vysoušedla se sníží absorpcí vody z okolního vzduchu. Čistěte měkkou látkou. Nikdy nepoužívejte silná čisticí činidla ani brusné materiály. Misku nebo UV lampu nenamáčejte ani neošetřujte sprejem.

## Odstraňování potíží

- *Po stisknutí tlačítka start se nerozsvítí žádná světla:* Je víko pevně uzavřeno a je stisknuté tlačítko start? Pokud ano, ověřte, že je síťový adaptér připojen jak k zařízení, tak vývodu/síťové zástrčce a že vývod/síťová zástrčka není ovládan vypínačem na stěně, který je v poloze vypnuto. Pak zkuste jiný síťový adaptér (je k dostání v místě nákupu, servisním středisku nebo na internetové adrese [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Používejte pouze náhradní adaptér dodávaný výrobcem. Pokud se jednotka přesto nespustí, může se jednat o závadu elektroniky, proto ji ke kontrole předejte prodejci nebo servisnímu centru.
- *Přístroj je hlučný:* Hlučnost obvykle souvisí s ventilátorem. Zvuk rezonuje uvnitř jednotky, proto je třeba s určitým hlukem počítat, i když se ve v tomto výrobku používají vysoce kvalitní kuličková ložiska. Pokud intenzita či frekvence hluku ventilátoru kolísá, odpojte jednotku od sítě a zkontrolujte, zda-li nedošlo k ucpání. Pokud ne, nechte jednotku opravit v servisu.
- *Jednotka se nesusí správně:* Měnili jste pravidelně vysoušedlo Dry-Brik? Je důležité, aby se vyměňovala podle pokynů. Jestliže není slyšet ventilátor, vraťte jednotku prodejci či servisnímu středisku k přezkoumání.

## For units that include a UV lamp:

- *Modré světlo není viditelné během prvních 1,5 minuty provozního cyklu, ale je zapnuté zelené světlo:* Zkontrolujte, zda-li je UV lampa pevně usazena ve své patici. Pokud se modré světlo během prvních 1 1/2 minut nerozsvítí, vyměňte UV lampu (je k dostání v místě nákupu, servisním středisku nebo na internetové adrese [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)). Používejte pouze náhradní speciální lampu dodávanou výrobcem. Nesvítí-li modré ani zelené světlo, viz „Nesvítí žádné světlo...“ výše.
- *Kapka kovu uvnitř UV lampy:* V závislosti na výrobci lampy mají některé lampy v trubici kapku kovu, což je zcela v pořádku. Je to důsledek jejich výrobního procesu příznivého k životnímu prostředí.

*Pokud žádné ze shora uvedených řešení problém neodstraní:*

V Severní Americe volejte zákaznickou službu na číslo 1-888-327-1299 nebo navštivte stránku [www.dryandstore.com](http://www.dryandstore.com)

V zemi mimo Severní Ameriku se obraťte na prodejce nebo servisní středisko k přezkoumání.

\* Některé modely neobsahují lampu ničící choroboplodné zárodky. Pokud to platí v případě Vašeho zařízení, neberte v úvahu žádný pokyn nebo připomínku, která uvádí, že "ničící choroboplodné zárodky", "modré světlo", "ultrafialový", "UV" nebo "lampa".