

DRY & STORE®

사용 지침

중요 안전 조치

본 제품은 가정용입니다. 전기 제품을 사용할 때, 특히 어린이가 있을 때는 다음과 같은 기본적인 안전 주의 사항을 항상 준수해야 합니다.

사용 전에 모든 지침을 읽어 보십시오.

위험 - 감전 위험을 줄이려면:

- 목욕 중에는 사용하지 마십시오.
- 욕조나 세면대에 떨어질 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마십시오.
- 물이나 액체 속에 담그거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 물 속에 빠진 경우 이 장치를 꺼내려 하지 마십시오. 즉시 플러그를 뽑으십시오.

경고 - 화상, 감전, 화재 또는 부상 위험을 줄이려면:

- 어린이나 노약자 근처에서 사용할 때는 주의하여 관리하십시오.
- 이 설명서의 지시에 따라 해당 용도로만 이 제품을 사용하십시오.
- 코드나 플러그가 손상된 경우, 제대로 작동하지 않는 경우, 떨어뜨리거나 손상된 경우 또는 물에 빠진 경우 본 제품을 작동하지 마십시오. 구입처나 서비스 센터에 검사 또는 수리를 요청하십시오.
- 소파나 침대 같이 부드러운 표면에 제품을 올려 놓지 마십시오. 보풀이나 머리카락이 공기 구멍을 막지 않도록 하십시오.
- 옥외에서 사용하거나 에어로졸(스프레이) 제품을 사용 중이거나 산소를 공급하는 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 장치에 포함된 AC 어댑터는 이 제품 전용입니다. 다른 제품에는 사용하지 말고 다른 전기 장치의 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 일부 Dry & Store 장치는 항균용으로 살균 자외선(UV)을 사용합니다. 이 광선은 덮개를 열면 켜지지 않습니다. 자외선을 노출시킬 수 있는 어떠한 구성 요소도 수정하거나 변경하지 마십시오.*
- 램프가* 부서질 경우에는 즉시 플러그를 뽑으십시오. 유리 파편을 제거할 때는 장갑을 착용하고 적절히 폐기하십시오.

참고 - 이 제품은 질병을 진단, 예방, 모니터, 치료 또는 완화하도록 설계된 것이 아닙니다.

작동 조건

이 기기의 작동 온도 범위는 95° ~ 104° F (35° ~ 40° C)입니다. 이 기기는 65° ~ 86° F (18° ~ 30° C)의 실내 실온에서 제대로 작동합니다.

다음 지침을 보관하십시오

소개

이 제품은 보청기, 소음 차단기, 귀 모니터 및 임플란트 장비를 포함한 모든 종류의 보청 기구에 사용하도록 설계되었습니다. 매일 사용할 경우 대부분의 보청 기기의 소리를 더욱 좋게 하고 더 오래 지속되며 믿을 수 있는 성능을 보여줍니다. 습도가 높은 조건에서는 공기 아연 배터리의 수명이 늘어납니다. 독점 Dry-Max™ 기술로 Dry & Store는 손상을 주는 수분 축적을 없애주고, 귀지를 건조시키며, 살균 램프(있을 경우)에 노출된 표면을 살균합니다.


최초 사용 전(중요)

1. **건조제 활성화:** 두 달에 한 번 교체해야 하는 일회용 Dry-Brik이 포함되어 있습니다. Dry-Brik은 중요한 세 가지 기능을 수행합니다: (1) 건조 주기 동안 장치에서 배출된 습기 분자를 영구적으로 제거하고 (2) 상자 내부의 상대 습도를 히터를 사용하여 가능한 습도보다 많이 낮추도록 촉진하여 건조 기능을 극대화하고 (3) 좋지 않은 냄새를 잡아줍니다.

Dry-Brik을 활성화하려면 포일 커버(**그림 1**)를 제거합니다. 포일이 제거되면 Dry Brik은 습기를 흡수하기 시작하므로 Dry Brik이 사용할 준비가 될 때까지 포일을 제거하지 마십시오.



2. **활성화 날짜 기록:** 교체 시기를 사용자에게 알려주기 위해 카드가 각 Dry Brik에 부착되어 있습니다. Dry-Brik이 사용되었던 날짜를 이 카드에 기록하십시오(**그림 2**).

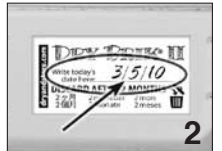


참고: 성능을 최적화하기 위해 2개월마다 Dry-Brik을 교체하십시오.

3. **그림 3처럼 활성화된 Dry-Brik을** 장치에 설치하십시오.



4. AC 어댑터를 연결합니다: 작은 원형 플러그는 장치 뒤에 꽂습니다(**그림 4**). 힘을 주지 말고 살짝 밀어 넣어야 합니다. 마지막으로 AC 어댑터를 활성 콘센트에 꽂으십시오.

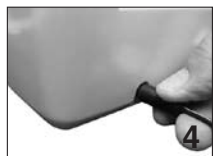

사용 지침

1. 건조실에 넣기 전에 보청기에서 과도한 습기와 귀지를 닦아 내십시오. 뚜껑을 열고 보청기나 임플란트 하드웨어를 오른쪽에 있는 큰 칸에 넣으십시오. 배터리를 넣은 상태로 둘 수 있으나 배터리 덮개를 열어 통풍시키십시오.



* 일부 모델에는 살균 램프가 들어 있지 않습니다. 그러한 기기를 갖고 있을 경우에는 “살균”, “파란 빛”, “자외선”, “UV” 또는 “램프”를 지칭하는 지침이나 설명을 무시하십시오.

2. 뚜껑을 닫고 장치 앞면에 있는 시작 버튼을 부드럽게 누릅니다(그림 5 ㉸). 약 8시간의 전체 건조 주기 시간 동안 시작 버튼 뒤에 보이는 녹색등이 켜집니다. 전체 8시간 주기를 통해 최상의 결과를 얻을 수 있지만 30분 정도의 짧은 시간도 유용합니다. 뚜껑이 열려 있으면 타이머가 재설정되어 모든 작동이 중단됩니다.

장치에 UV 살균 램프가 있을 경우 장치 가동 시작 후 1분 30초 동안 장치 꼭대기에 청색등이 켜져서 보여 살균 주기가 진행 중이라는 것을 나타냅니다.

3. 보청 기기를 최상의 수준으로 관리하기 위해 활성화 날짜로부터 두 달이 지나면 Dry-Brik을 교체한다는 것이 중요합니다. 다 쓴 Dry-Brik은 가정 폐품으로 처리합니다.

UV* 살균 사이클에 대하여

귀 들과 보청 기기는 세균과 박테리아의 온상입니다. 일부 모델에는 그와 같은 유기체를 죽이는 살균 UV 램프가 포함되어 있어 많은 사용자들이 그 결과 가려움과 염증이 줄어드는 것을 경험하게 될 것입니다. 살균 효과는 램프에 가까이 갈수록 강력해지고 멀어질수록 감소합니다. 그러나 이 기기는 살균기가 아니며 제조업체는 박테리아 살균력에 대해 어떤 언급도 하지 않습니다. 이 기기는 질병을 진단, 예방, 모니터, 치료 또는 완화하도록 설계되지 않았습니다. UV 램프는 가열 주기의 일부가 아니므로 건조 기능에 영향을 미치지 않으면서 제거할 수 있습니다.

임플란트 장비와 함께 사용

임플란트용 하드웨어는 제대로 기능하도록 건조된 채로 보관해야 하며, 이 기기의 정기적인 사용은 환경 및/또는 땀으로 인해 축적되는 수분을 제거할 수 있습니다. 일부 사용자들은 특히 뜨겁고 습한 날씨에 공기 아연 배터리의 수명 개선을 인식할 수 있습니다. 개별적인 결과는 상황에 따라 다릅니다.

- **귀 뒤에 가는 스피지 프로세서:** 해당될 경우 프로세서에 아연-공기 배터리를 그대로 두고 배터리 덮개를 여십시오. 프로세서, 머리 부분 및 케이블은 건조실 오른쪽에 두십시오. 트레이 왼쪽에는 건조제 이외에는 아무 것도 놓지 마십시오.
- **몸에 착용하는 스피지 프로세서:** 원활한 공기 흐름을 위해 건조실이 너무 꽉 차지 않는 수준에서 부품을 가능한 많이 넣으십시오. 크기 제한으로 인해 프로세서는 다른 하드웨어와 별도로 유지해야 합니다. 이런 경우, 마이크 어셈블리는 습기에 쉽게 손상될 수 있으므로 프로세서보다 더 자주 컨디셔닝해야 합니다. 결합한 크기가 건조 칸막이에 너무 클 경우에는 배터리 팩을 일부 프로세서에서 제거해야 할 수도 있습니다.

일반 제품 보관

최상의 결과를 위해 이 기기는 욕실과 같은 습도가 높은 장소에서는 작동하지 마십시오. 주변 공기로부터 습기를 흡수하면 건조제의 효과가 줄어들기 때문에 뚜껑은 항상 닫아 두십시오. 부드러운 천으로 청소하십시오. 강한 세정제나 연마제는 절대로 사용하지 마십시오. 트레이나 UV 램프에 액체를 뿌리지 마십시오.

문제 해결

- **시작 버튼을 눌러도 표시등이 켜지지 않습니다:** 뚜껑이 단단히 닫혀 있으며 시작 버튼이 눌러 있습니까? 그렇다면 AC 어댑터가 기기와 콘센트 모두에 제대로 연결되어 있고 콘센트가 OFF 위치에 있는 벽면 스위치로 제어되지 않은지 확인하십시오. 그 다음, 다른 AC 어댑터(구입처, 서비스 센터 또는 www.dryandstore.com에서 구입 가능)로 시도하십시오. 제조업체가 제공하는 어댑터로만 교체하십시오. 그래도 장치가 시작되지 않으면 내부 전기 설비에 문제가 있을 수 있으므로 구입처나 서비스 센터로 돌려 보내 점검을 받으십시오.
- **장치에서 소음이 난다:** 소음 문제는 대개 팬과 관련이 있습니다. 소리는 장치 내에서 공명하므로 이 제품에서 사용하는 높은 품질의 볼 베어링 팬에서도 약간의 소음이 날 수 있습니다. 팬 소음이 심하거나 빈번할 경우 장치 전원을 분리하고 방해물이 있는지 확인하십시오. 없다면 장치를 서비스 받으십시오.
- **장치가 제대로 건조되지 않고 있습니다:** Dry Brik을 정기적으로 교체했습니까? 지시에 따라 교체하는 것이 중요합니다. 팬 소리가 들리지 않으면 구입처나 서비스 센터에서 장치를 점검 받으십시오.

UV* 램프를 포함 단위 :

- **작동 사이클의 처음 1분 30초 동안 청색등이 나타나지 않고 녹색등이 켜집니다.** UV 램프가 소켓에 잘 끼워져 있는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 램프를 제거했다 다시 끼운 다음, 뚜껑을 단단히 닫고 장치를 다시 시작하십시오. 청색등이 처음 1½분 동안 켜지지 않을 경우, UV 램프를 교체하십시오(구입처, 서비스 센터 또는 www.dryandstore.com에서 구입 가능). 제조업체가 제공하는 특수 램프로만 교체하십시오. 청색등 및 녹색등이 모두 켜지지 않으면 위의 “(on/off) 버튼을 눌러도 표시등이 켜지지 않습니다”를 참조하십시오.
- **UV 램프 안의 금속 비드:** 램프, 제조업체에 따라 일부 램프에는 관 내에 금속 비드가 있으며, 이는 정상입니다. 환경적으로 민감한 제조 공정의 결과입니다.

위의 방법으로 문제가 해결되지 않는 경우:

북미에서는 고객 서비스 센터
(1-888-327-1299)로 문의하거나
www.dryandstore.com 을 방문하십시오.

북미 이외에서는 구입처나 서비스 센터에 연락하여
점검을 받으십시오.

* 일부 모델에는 살균 램프가 들어 있지 않습니다. 그러한 기기를 갖고 있을 경우에는 “살균”, “파란 빛”, “자외선”, “UV” 또는 “램프”를 지칭하는 지침이나 설명을 무시하십시오.